


Link do produktu: <https://akmed.pl/otwarta-orteza-reki-i-przedramienia-am-osn-u-06-p-2252.html>

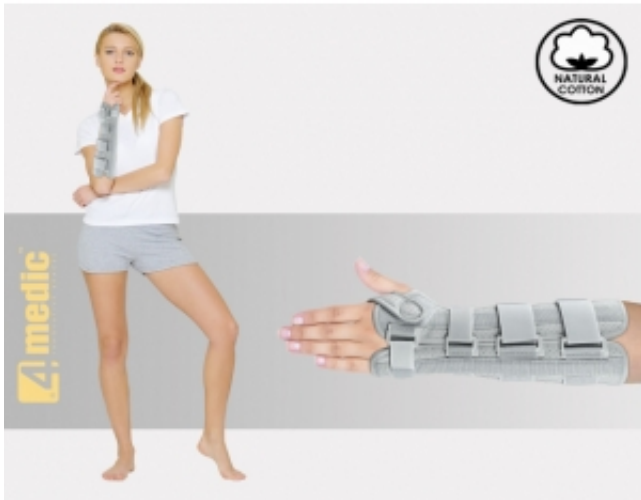

Otwarta orteza ręki i przedramienia AM-OSN-U-06

Numer katalogowy **AM-OSN-U-06**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Otwarta orteza przedramienia została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki czemu lepiej stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy i nadgarstek.

Orteza została w całości wykonana z nowego innowacyjnego surowca **AirSanmed**. Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonego stawu. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, wewnątrz półsztywna perforowana pianka komfortowa, na zewnątrz natomiast zainstalowany jest laminat medyczny z funkcją paroprzepuszczalną, który w celu łatwiejszego odprowadzania potu od ciała pacjenta został dodatkowo wyperforowany.

Wyrób posiada konstrukcję otwartą, co ułatwia jego zakładanie na kończynę oraz regulowane zapięcie przednie, co czyni ortezę jeszcze bardziej uniwersalną i ułatwia dopasowanie do każdego kształtu dłoni.

W dłoniowej części ortezy zainstalowano miękką elastyczną poduszkę poprawiającą komfort użytkowania wyrobu. Konstrukcja ortezy oraz użyte surowce przeciwdziałają wystąpieniu u jej użytkowników zespołu cieśni nadgarstka.

W dolnej części wyrobu zastosowano anatomicznie wyprofilowaną szynę dłoniową, która galwanicznie została zabezpieczona przed działaniem ludzkiego potu.

Zapięcia wyrobu wykonano przy użyciu zespołu dwóch szerokich taśm obwodowych oraz jednej wąskiej taśmy dłoniowej. Zakres regulacji zapięć jest bardzo duży i dzięki temu gwarantuje on szeroki zakres regulacji i stabilizacji.

Stabilizacja 3 punktowa L3P (LOCK 3 POINTS)

W dolnej części wyrobu zastosowano anatomicznie wyprofilowaną szynę dłoniową, która galwanicznie została zabezpieczona przed działaniem ludzkiego potu. W górnej części wyrobu zainstalowano dwie listwy z tworzywa sztucznego, które wraz z łyżką dłoniową przekrojowo tworzą trzy obwodowe punkty podparcia kończyny górnej. Taki sposób stabilizacji przedramienia jest

sposobem najbardziej skutecznym.

Właściwości

1. **Doskonała stabilizacja** – dzięki zastosowaniu szerokiej i sztywnej wkładki ortopedycznej oraz dwóch stąlek uzyskano doskonałą stabilizację wyrobu.
2. **Komfort użytkowania** – dzięki zastosowaniu nowego surowca AirSanmed, pot od ciała pacjenta jest skutecznie odprowadzany.
3. **Łatwość użytkowania** – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
4. **Utrzymanie właściwej higieny** - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

Przeznaczenie

Ortezę przedramienia należy stosować w przypadkach:

- zwichnięć stawu nadgarstkowego,
- uszkodzenia i zapaleń ścięgien,
- zespołów bólowych nadgarstka,
- ostrych lub przewlekłych zapaleń kości nadgarstka lub śródreńca,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia, reumatologia),
- schorzeń neurologicznych pochodzenia centralnego lub obwodowego,
- zapobiegawczo podczas uprawiania sportu lub wyęężonej pracy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

TYP: lewy , prawy